



医薬関連化合物


ベンゾジアゼピン系薬物 (Benzodiazepine)

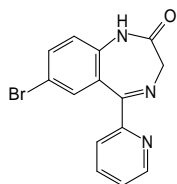


ブロマゼパム
(Bromazepam)

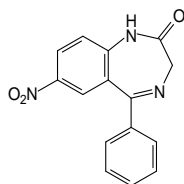


ニトラゼパム
(Nitrazepam)

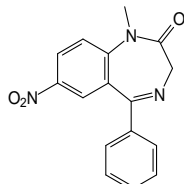


ニメタゼパム
(Nimetazepam)

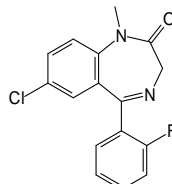

フルジアゼパム
(Fludiazepam)

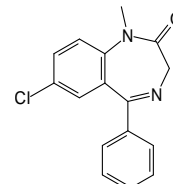


ジアゼパム
(Diazepam)

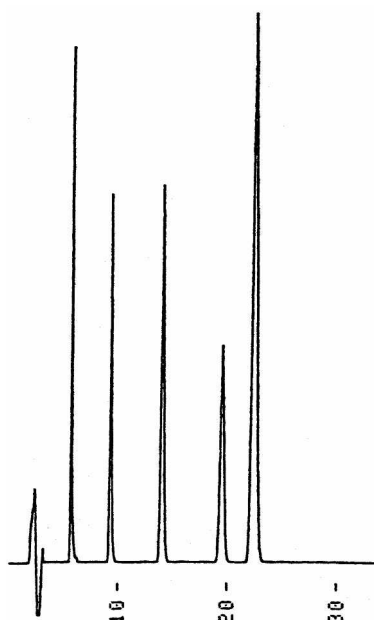


Column : SUMIPAX ODS C-217 (5 μ m, 4.6mm \times 150mm)
Mobile phase : 20mmol/L potassium phosphate buffer (pH 7.0) /
acetonitrile (60/40)
Flow rate : 0.7 mL/min
Detector : UV 254nm

医薬関連化合物


ベンゾジアゼピン系薬物 (Benzodiazepine)

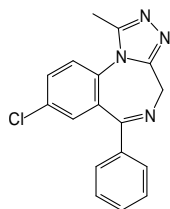


アルプラゾラム
(Alprazolam)

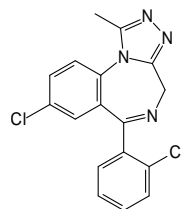

トリアゾラム
(Triazolam)

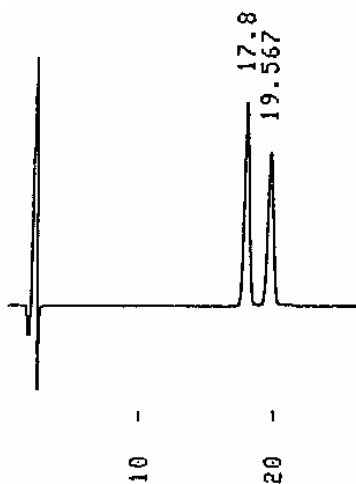

SUMIPAX ODS A-217(5 μm)

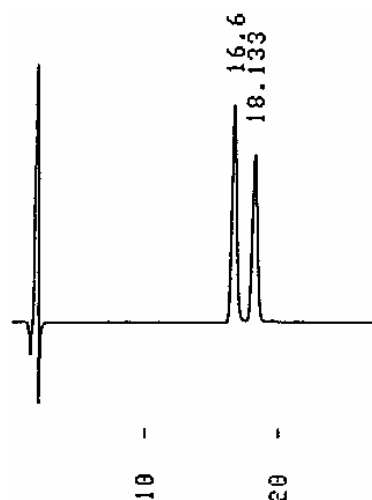

SUMIPAX ODS C-217(5 μm)

Column : 4.6mm × 150mm
Mobile phase : 20mmol/L potassium phosphate buffer (pH 7.0) / acetonitrile (70/30)
Flow rate : 0.8 mL/min
Detector : UV 254nm